

Papierovo-fóliové vrecká a rolky so sklodom, ktoré umožňujú balenie väčších predmetov.

Vysokokvalitné materiály použité pri výrobe obalov, ako aj overený technologický výrobný proces poskytujú „peel“ efekt-bezprašné otváranie obalov. To minimalizuje riziko kontaminácie časticami celulózy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri otváraní papierových obalov.

Chemické indikátory procesu sterilizácie sú vytlačené na papieri v oblasti zvaru.

Výrobok spĺňa požiadavky EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 a EN ISO 11140-1.

Použitie:


- ako obal na sterilizáciu parou (STEAM), etylénoxidom (EO) a formaldehydom (FORM)

Druhy:

- vrecká
- rolky

Veľkosť a balenie:

- vrecká - široká škála veľkostí: šírka od 40 mm do 600 mm; dĺžka od 90 mm do 1200 mm; balené po 100 ks
- rolky - široká škála veľkostí: šírka od 50 mm do 650 mm; dĺžka 60 m a 200 m; balené po 1 ks

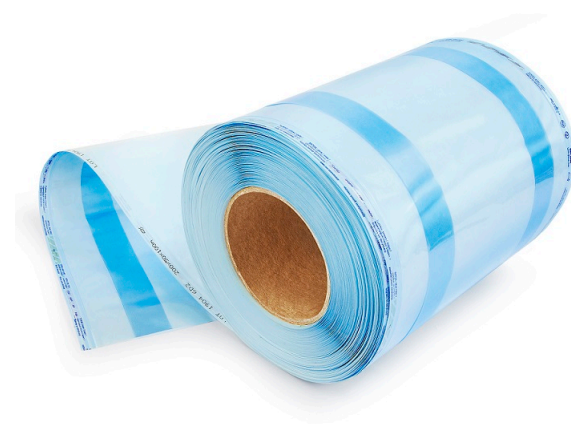

MD

