

Urologické pásy sú pletené z priehľadnej monofilamentnej polypropylénovej priadze. Na oboch koncoch pásy sú pripevnené modré úchytky umožňujúce ich bezpečné upevnenie na vhodný aplikátor. Tieto úchytky sú taktiež vyrobené z monofilamentnej polypropylénovej priadze. Každá úchytka má navyše dodatočnú ochranu pred vytrhnutím z pásy vplyvom sily. Páska samotná je biostabilná, takže nestráca fyzikálne vlastnosti pri dlhodobom kontakte s tkanivom a tekutinami, má monofilamentnú štruktúru minimalizujúcu riziko bakteriálnej infekcie a optimálne navrhnutú štruktúru s veľkosťou pórov umožňujúcou rýchle prerastanie spojivového tkaniva.

Použitie:

- je určená pre chirurgickú liečbu stresovej inkontinencie u žien metódami TVT a TOT


Druhy:

- sterilná (sterilizovaná etylénoxidom)

Veľkosti a balenie:

- dĺžka 45 cm a 60 cm
- zabalená v dvojitej papierovej fólii vložená do kartónovej krabice po 1 ks

Viac informácií: www.dallop-nm.com

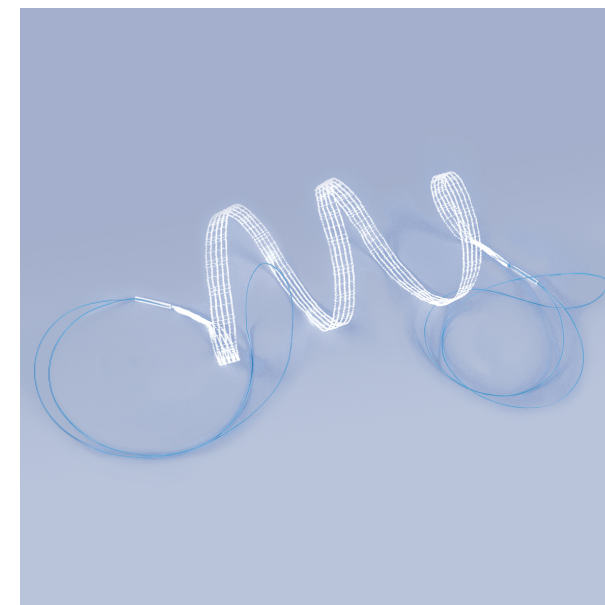

MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou PCBC SA a nesú označenie CE s číslom 1434

