Matoset dialyzačná spojovacia súprava – aplikácia

Príklad súpravy na pripojenie dialýzy MA-991-ZEST-487.

1




Pred začatím procedúry si umyte ruky (lekár aj pacient).

2



Na vykonanie procedúry si pripravte dezinfekčný prostriedok, škrtidlo a vhodné kanyly.

3

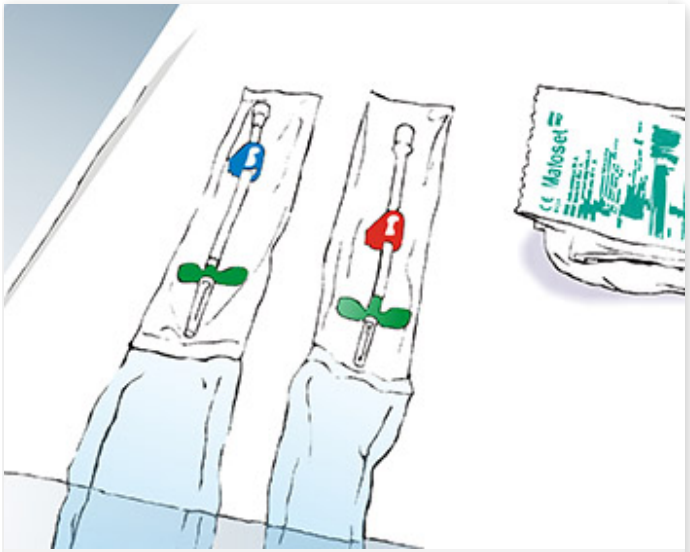

Vyberte sterilné rúško a umiestnite ho pod predlaktie pacienta.


©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026

4



»

5

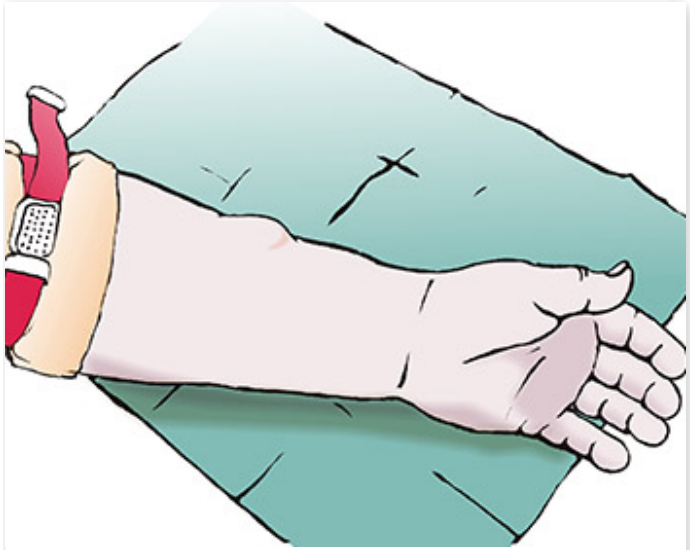

Potom si nasaďte jednu rukavicu na ľavú ruku a druhú nechajte na sterilnej časti otvoreného obalu.


6



»

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026

7

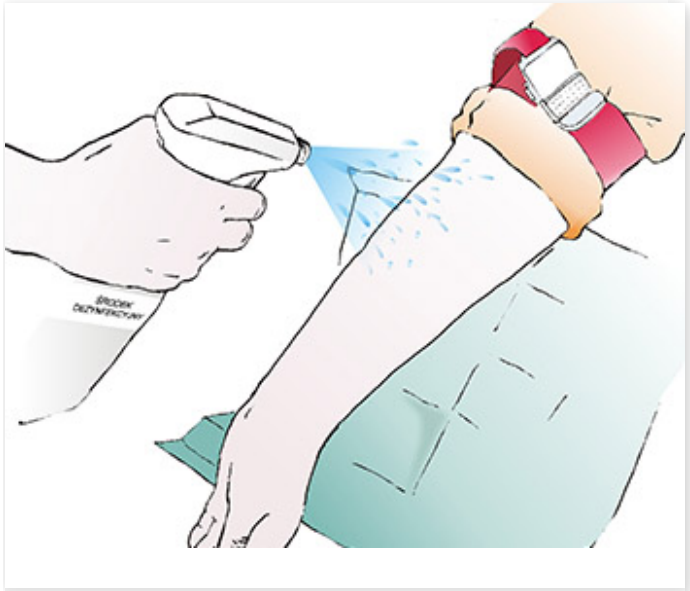

Dezinfikujte pacientovo predlaktie pomocou pripravenej dezinfekčnej tekutiny a sterilných tampónov zo súpravy.

8



»


9



»

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026

10

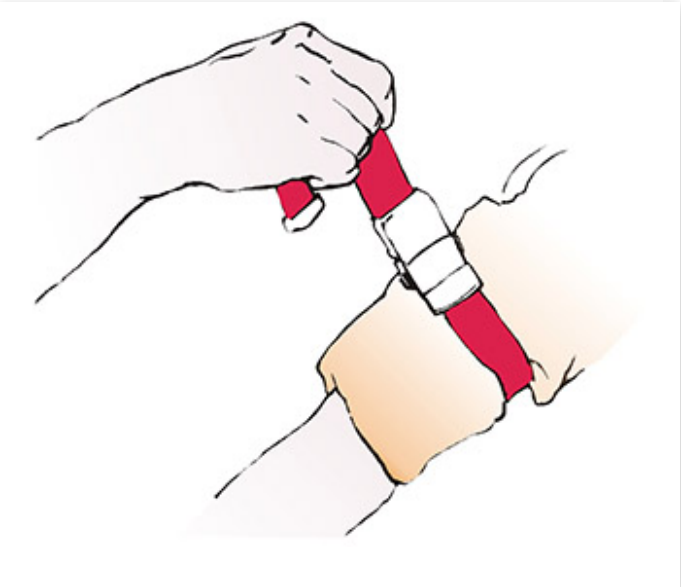


Utiahnite škrtidlo.

11



Nasaďte si správnu rukavicu.


12

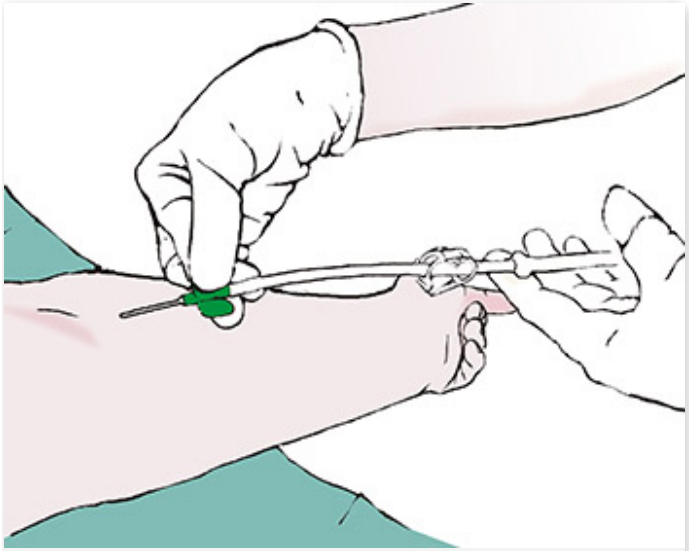

Umiestnite kanylu do žily.


©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026

13

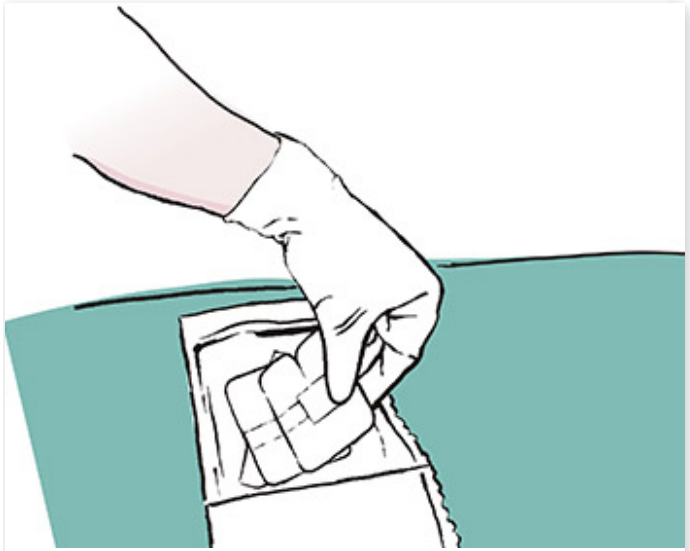


Po zavedení kanyly ju zafixujte špeciálnym obväzom na upevnenie kanýl (tiež v súprave).

14

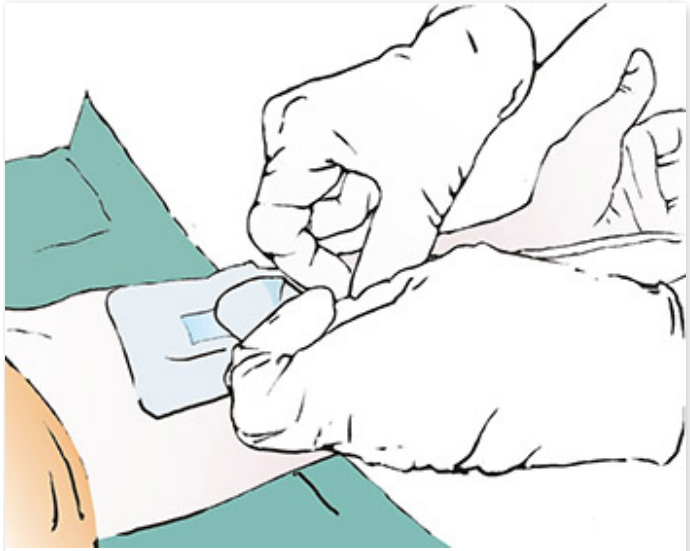


15

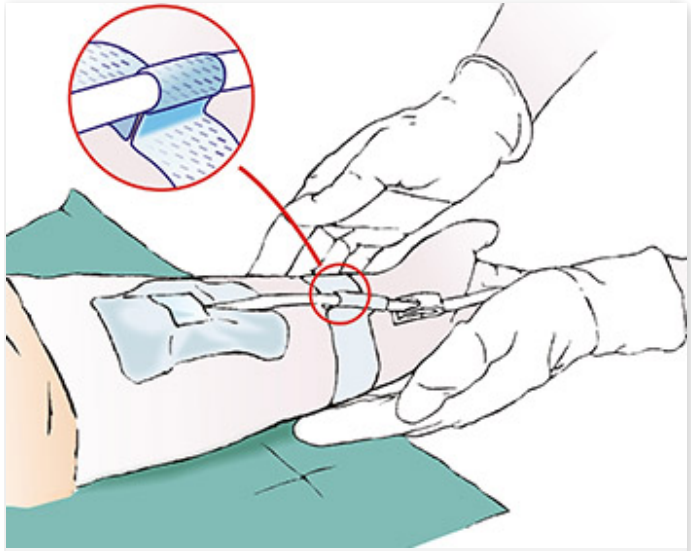

Na konci zaistite drenáž kanyly netkanou lepiacou páskou.

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026

16

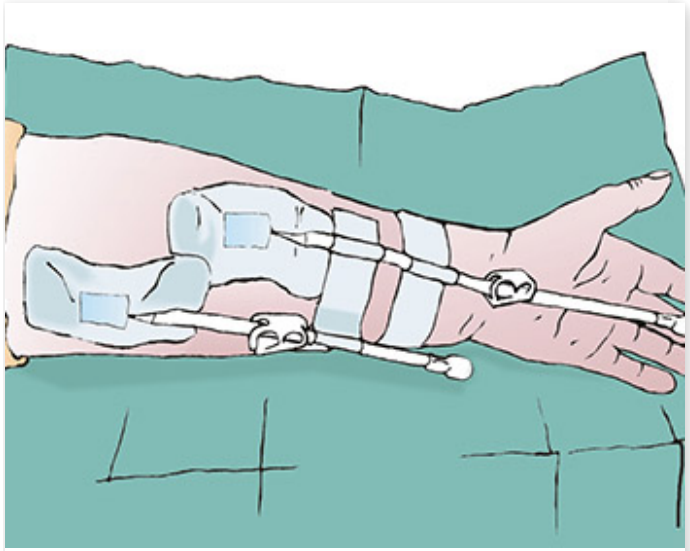

Teraz je pacient pripojený. Dialýza trvá 3-4 hodiny.

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026