Matoset dialyzačná spojovacia súprava – spôsob odpojenia.

Príklad súpravy na odpojenie dialýzy MA-991-ZEST-488.

1



Pred ukončením procedúry si umyte ruky (lekár).

2



Otvorte súpravu na odpojenie dialýzy.

3



Nasaďte pacientovi na ruku jednu rukavicu.

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026


Matoset dialyzačná spojovacia súprava – spôsob odpojenia.

4




Potom si špecialista nasadí obe rukavice.

5

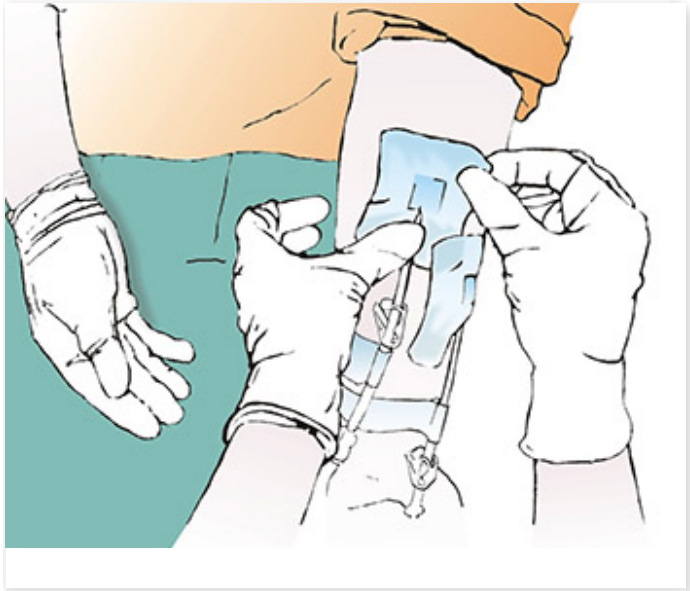

Postupne vyberte kanyly, pričom pomocou pacienta zaistite miesta vpichu tampónmi.


6

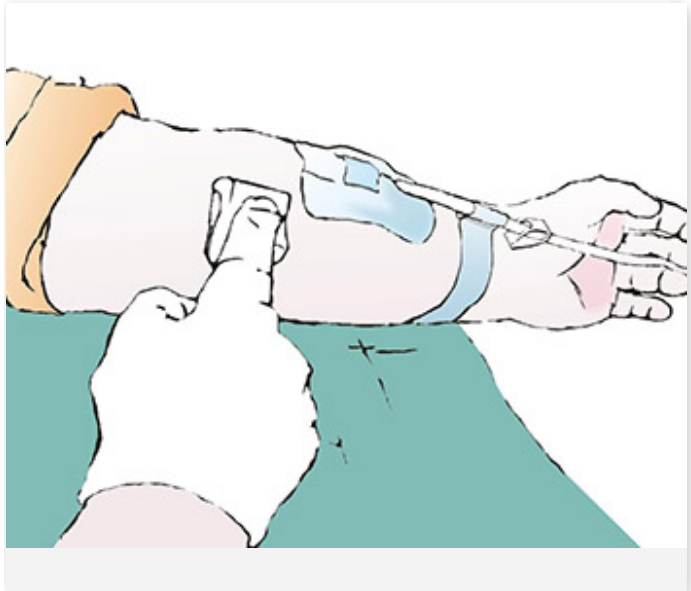

»

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026

7

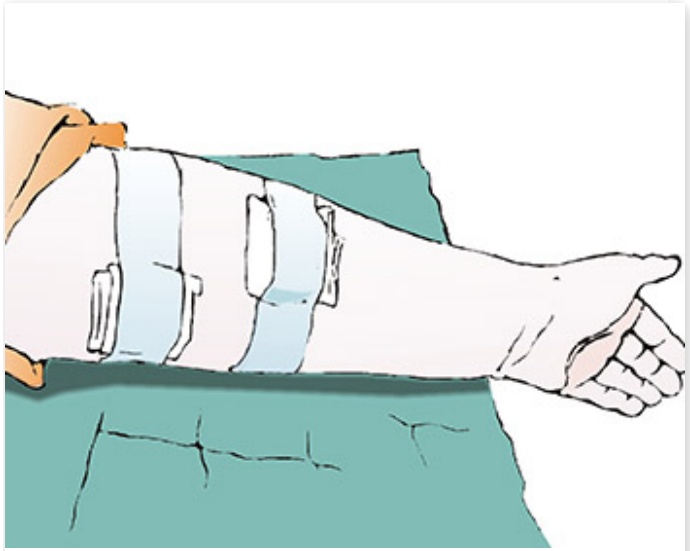

Po odstránení oboch kanýl musia byť miesta vpichu chránené obväzmi zloženými z netkaných tampónov a lepiacich pások.

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026