
Rozloženie súpravy na pôrod Matodrape

1



Po otvorení obalu položíme rúšku na pomocný stôl. Vonkajším rúškom prikryjeme stôl. Rozložíme obsah súpravy na stole.

2

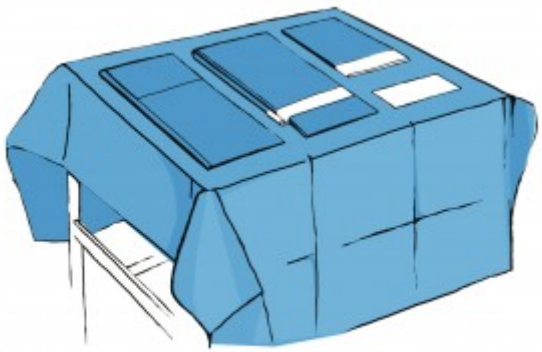

Položíme väčšiu podložku Seni Soft pod bedrá pacientky.


3



Použijeme rúško zo súpravy na obalenie nôh pacientky kvôli zaisteniu sterility operačného pola.

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026

4

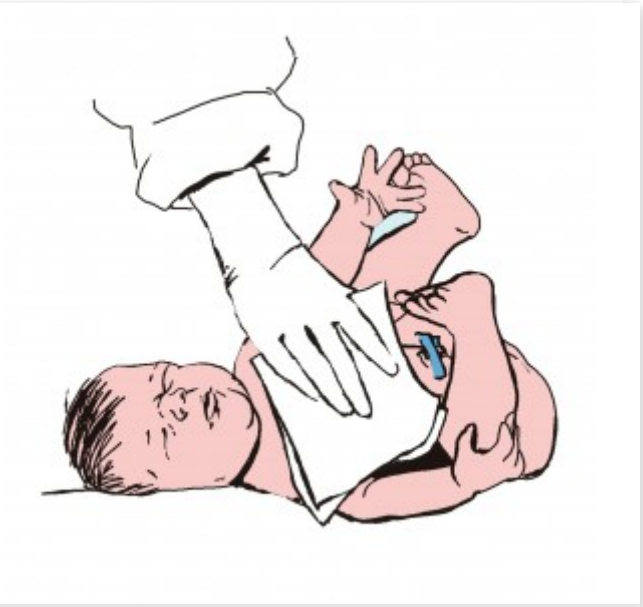

Po pôrode utrieme novorodenca priloženým rúškom z mäkkej bielej netkanej textílie.

5



Zabalíme novorodenca do menšej podložky Seni Soft a nasadíme mu na hlavu čiapočku.

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026